

i n f i n i a P U L S E

SPECTRUM PEMF
TECHNOLOGY

UPUTE ZA UPOTREBU

Dobrodošli u svijet inovativne wellness tehnologije s INFINIA PULSE sustavom!

Doživite jedinstven pristup poboljšanju kvalitete življenja pomoću pulsnog elektromagnetnog polja (eng. pulsed electromagnetic field, PEMF).

Ovaj priručnik za korisnike osmišljen je kako bi vas vodio kroz značajke, sigurnost i optimalnu upotrebu vašeg INFINIA PULSE uređaja. Posebnost ovog uređaja leži u visokointenzivnim impulsima i dinamičkoj promjeni frekvencija unutar spektra 50-900Hz.

Hvala vam što ste odabrali INFINIA PULSE uređaj. Uživajte u iskustvu i transformacijskoj snazi pulsnog elektromagnetnog polja!

1 UVOD

Što je PEMF?	3
Opis uređaja i namjena	4

2 SIGURNOSNE INFORMACIJE

Sigurnosne mjere	5
Kontraindikacije	6
Nuspojave	8

3 UPOTREBA

Sastavljanje i pokretanje	9
Načini rada i podešavanje	10
Održavanje	14
Troubleshooting	15

4 OSTALO

Tehničke specifikacije i jamstvo	16
Podaci o proizvođaču	18
Izjava o odgovornosti	19

Tretman pulsnim elektromagnetnim poljem (PEMF) je neinvazivna metoda koja koristi precizno podešene elektromagnetske impulse za interakciju s tjelesnim sustavima na staničnoj razini. Uređaj emitira elektromagnetske impulse koji prodiru duboko u tkiva potičući prirodne stanične procese, podržavajući regenerativne mehanizme, energetske ravnotežu i opću dobrobit organizma.

INFINIA PULSE uređaj jedinstven je u svijetu PEMF uređaja jer koristi dinamičku promjenu frekvencija unutar spektra kako bi unutar jednog tretmana stimulirao više vrsta tkiva na zahvaćenom području.

Redovita upotreba PEMF tretmana može potaknuti:

- osjećaj opuštenosti i ravnoteže
- smanjenje upale i prirodne regeneracijske procese
- mikrocirkulaciju i oksigenaciju tkiva
- smanjenje osjećaja boli i ukočenosti
- poboljšanje kvalitete sna i relaksaciju

Uređaj je namijenjen profesionalnim korisnicima u svijetu wellnesa, ali i pojedincima koji žele provoditi PEMF tretmane u vlastitom domu. Za kućnu upotrebu, preporučuje se konzultirati se s vašim liječnikom ili terapeutom prije korištenja uređaja.

PEMF tretmani namijenjeni su odraslim osobama koje nemaju medicinske kontraindikacije. Uređaj nije namijenjen za upotrebu kod djece mlađe od 14 godina. Osobe koje nisu u mogućnosti samostalno razumjeti i slijediti upute moraju biti pod nadzorom kvalificirane osobe za vrijeme korištenja uređaja.

Korištenje INFINIA PULSE uređaja je intuitivno i jednostavno. Uređaj se sastoji od:

- upravljačke ploče (1)
- izvršne jedinice (2) (s pripadajućim napajanjem (3))
- komunikacijskog kabela (4)
- aplikatora (5).

Izvršna jedinica spaja se u zidnu utičnicu pomoću kabela za napajanje, te je komunikacijskim kabelom spojena s upravljačkom pločom. Detaljne upute za postavljanje, upravljanje značajkama i korištenje uređaja nalaze se u ovom priručniku.

Prije primjene, potrebno je provjeriti sigurnosne smjernice i kontraindikacije.



1. **Pažljivo proučite upute** – Prije korištenja temeljito pročitajte priručnik i slijedite sve preporuke proizvođača.
2. **Provjera uređaja i strujnih instalacija prije uporabe** – Osigurajte da su uređaj, kabeli i aplikator u ispravnom stanju, bez vidljivih oštećenja. Ne koristite uređaj ako je neispravan. Provjerite kvalitetu uzemljenja u vašim strujnim instalacijama.
3. **Ispravna instalacija i postavljanje** – Uređaj mora biti pravilno spojen i postavljen na stabilnu, ravnu površinu, daleko od izvora topline i zapaljivih materijala.
4. **Zaštita od vlage i tekućina** – Ne koristite uređaj u vlažnim prostorima ili blizini vode kako biste spriječili električni udar, kratke spojeve i oštećenja.
5. **Osiguranje adekvatne ventilacije** – Ne prekrivajte uređaj kako biste spriječili pregrijavanje i osigurali siguran rad.
6. **Sigurnosna udaljenost**
 - Držite uređaj najmanje **3 metra udaljen od osjetljive elektronike (npr. mobiteli, računala, ključeva od auta i sl.), kreditnih kartica i magnetskih medija, jer snažno elektromagnetsko polje može uzrokovati smetnje ili oštećenja.**
 - Osobe s kontraindikacijama ne smiju biti izložene djelovanju uređaja – pogledajte detalje u priručniku.
7. **Ograničenje trajanja tretmana i korištenje aplikatora** – Nemojte koristiti uređaj dulje od 60 minuta dnevno po osobi kako biste spriječili moguće nuspojave. Ukoliko uređaj koristite učestalo, potrebno je napraviti pauzu nakon 4 tjedna upotrebe. Aplikator uređaja ne smije se stavljati na sluznicu i/ili izravno na oštećenu kožu.
8. **Nadzor tijekom korištenja** – Uređaj ne smije raditi bez nadzora. Nakon završetka tretmana isključite ga iz napajanja i pohranite na suhom i sigurnom mjestu.
9. **Održavanje i čišćenje** – Redovito čistite uređaj kako biste spriječili nakupljanje prašine i osigurali ispravan rad. Koristite samo odobrene dodatke i pribor.
10. **Djeca i kućni ljubimci** – Držite uređaj izvan njihova dosega kako biste spriječili ozljede ili oštećenja.
11. **Praćenje upozorenja na ekranu** – Obratite pažnju na eventualne poruke ili indikatore na zaslonu koji signaliziraju kvarove ili potrebu za održavanjem.
12. **Sigurno isključivanje i popravak** – Uređaj uvijek isključite iz struje nakon korištenja. Ne popravljajte ga sami – u slučaju kvara kontaktirajte proizvođača ili ovlašteni servis.

Prije početka korištenja, preporučuje se pažljivo proučiti sigurnosne smjernice i upute kako bi se osigurala sigurna i učinkovita primjena uređaja.

Osobama s narušenim zdravstvenim stanjem, nerazjašnjenim simptomima te onima koji su na farmakološkoj terapiji preporučuje se konzultacija s liječnikom prije početka tretmana.

APSOLUTNE KONTRAINDIKACIJE

Uređaj se ne smije koristiti u navedenim slučajevima, jer postoji značajan rizik za zdravlje korisnika.

Ugrađeni elektronički uređaji – Osobe s pacemakerima, inzulinskim pumpama, neurostimulatorima ili drugim elektroničkim uređajima ne smiju koristiti PEMF uređaje, jer elektromagnetska polja mogu ometati njihov rad.

Trudnoća – Zbog nedostatka podataka o sigurnosti primjene tijekom trudnoće, upotreba uređaja tijekom trudnoće nije preporučena.

Epilepsija i ozbiljni neurološki poremećaji – Osobe s epilepsijom ili poviješću napadaja ne smiju koristiti uređaj, jer elektromagnetska polja mogu izazvati napadaje.

Maligna oboljenja – Osobe s dijagnosticiranim malignim oboljenjima trebaju izbjegavati korištenje uređaja, osim ako im to nije izričito odobrio nadležni liječnik.

Transplantirani organi – Pulsna elektromagnetska polja mogu utjecati na imunološku funkciju koja može ugroziti transplantat.

Prisutnost implantata označenih kao „MRI unsafe“ (koji se ne smiju podvrgnuti snimanju pomoću magnetne rezonancije) – Preporuča se savjetovanje s liječnikom ukoliko postoji prisutnost proteze ili drugih metalnih dijelova u tijelu kako bi se utvrdilo o kojoj vrsti implantata se radi.

Aktivno krvarenje – PEMF se ne smije koristiti u slučaju aktivnog unutarnjeg ili vanjskog krvarenja zbog mogućeg utjecaja na cirkulaciju.

2 SIGURNOSNE INFORMACIJE

Osnovne mjere sigurnosti
Kontraindikacije
Nuspojave

i n f i n i a
P U L S E

RELATIVNE KONTRAINDIKACIJE

Upotreba uređaja moguća uz oprez i prilagodbu intenziteta tijekom korištenja.

Teška ili kronična oboljenja – Osobe s ozbiljnim i/ili kroničnim zdravstvenim stanjima trebaju obavezno konzultirati liječnika prije korištenja uređaja.

Akutne infekcije i povišena tjelesna temperatura – Preporučuje se izbjegavanje korištenja uređaja tijekom akutnih bakterijskih ili virusnih infekcija popraćenih povišenom temperaturom.

Poremećaji zgrušavanja krvi – Osobe s poremećajima zgrušavanja trebaju se konzultirati s liječnikom, jer elektromagnetska polja mogu utjecati na cirkulaciju.

Kožne bolesti i rane – Upotreba uređaja nije preporučena kod osoba koje imaju akutne kožne infekcije, rane ili opekotine, dok se stanje ne stabilizira.

Nedavna kirurška intervencija – Osobe koje su nedavno prošle kirurški zahvat, osobito na srcu ili živčanom sustavu, trebaju se posavjetovati s liječnikom prije korištenja uređaja.

Metalni implantati (MRI safe) – Osobe s titanskim implantatima, umjetnim zglobovima, vijcima i pločicama obično mogu koristiti PEMF uređaj, ali aplikator ne smije biti postavljen izravno na implantat.

Silikonski implantati – izbjegavati korištenje PEMF tretmana blizu područja gdje su ugrađeni silikonski implantati zbog mogućih promjena svojstava implantiranog materijala

2 SIGURNOSNE INFORMACIJE

Osnovne mjere sigurnosti
Kontraindikacije
Nuspojave

i N F I N I A
P U L S E

Dosadašnjim istraživanjem PEMF tretmana nije zabilježena pojava trajnih nuspojava, čak ni kod dugotrajne uporabe, no rijetko je moguća kratkoročna prolazna nelagoda koja se može očitovati kao:

Lagani umor ili pospanost – Neki korisnici mogu osjetiti privremeni umor ili iscrpljenost nakon tretmana, posebno pri početnom korištenju ili uz veće intenzitete.

Povećana osjetljivost u tretiranom području – U rijetkim slučajevima, područje na koje se primjenjuje PEMF može postati privremeno osjetljivije ili bolnije, što je obično prolazno.

Blaga vrtoglavica ili omaglica – Neki korisnici mogu osjetiti vrtoglavicu ili omaglicu tijekom ili neposredno nakon tretmana, osobito ako su skloni niskom krvnom tlaku.

Povećanje tjelesne temperature – Tretman može uzrokovati privremeno povećanje temperature u tijelu, što je obično kratkotrajno.

Lagana glavobolja – U rijetkim slučajevima, korisnici mogu prijaviti blagu glavobolju koja se povlači nakon završetka tretmana.

Nesanica ili poremećaj spavanja – Neki ljudi mogu doživjeti nesanicu ili smetnje u spavanju, osobito ako se tretman visokog intenziteta koristi neposredno prije spavanja.

Blaga mučnina – Neki korisnici mogu osjetiti laganu mučninu, osobito pri početnim tretmanima ili uz visoke frekvencije.

Navedene nuspojave često su posljedica detoksikacije organizma potaknute PEMF-om. Adekvatna konzumacija vode (otprilike 2L dnevno) pomaže održavanju ravnoteže tekućina u tijelu i podržava prirodne procese detoksikacije i smanjuje mogućnost nuspojava.

Reakcije na PEMF tretmane mogu varirati među pojedincima stoga je važno pratiti vlastite reakcije i prilagoditi intenzitet prema potrebi. Preporučuje se početak tretmana s nižim intenzitetima i postepeno povećanje kako bi se smanjila vjerojatnost nuspojava.

Osobe koje su preosjetljive na elektromagnetna zračenja imaju povećan rizik od nuspojava prilikom upotrebe ovog proizvoda. Ukoliko sumnjate da ste preosjetljivi na elektromagnetna zračenja nije preporučeno upotrebljavati INFINIA PULSE uređaj.

U slučaju da nuspojave potraju duže od nekoliko sati potrebno se konzultirati s liječnikom.

3



UPOTREBA

Sastavljanje i pokretanje
Načini rada i podešavanje
Održavanje
Troubleshooting

INFINIA
PULSE

1. PRIKLJUČIVANJE KABELA ZA NAPAJANJE

Priključite kabel za napajanje u uređaj i utičnicu.

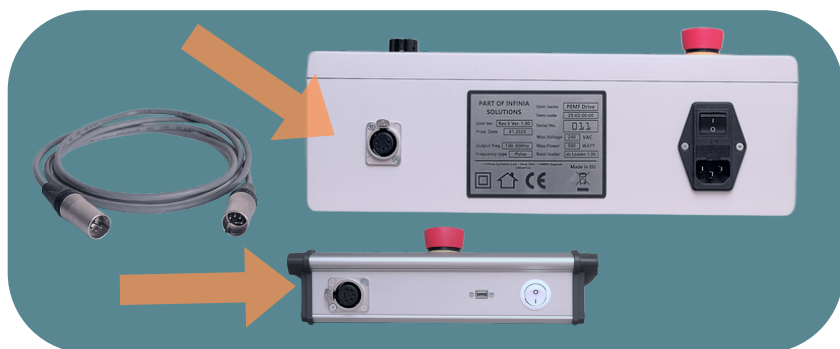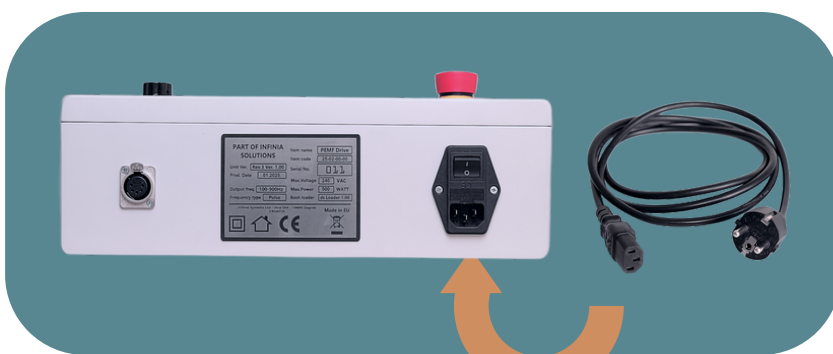


2. PRIKLJUČIVANJE KOMUNIKACIJSKOG KABELA

Priključite komunikacijski kabel u konektor na izvršnoj jedinici i upravljačkoj ploči.

3. PRIKLJUČIVANJE APLIKATORA

Priključite odabrani aplikator u konektor te zakrenite u smjeru kazaljke na satu dok ne klikne i srebrni osigurač se nađe na vrhu. Za uklanjanje aplikatora povucite srebrni osigurač na konektoru, okrenite konektor u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i lagano povucite.

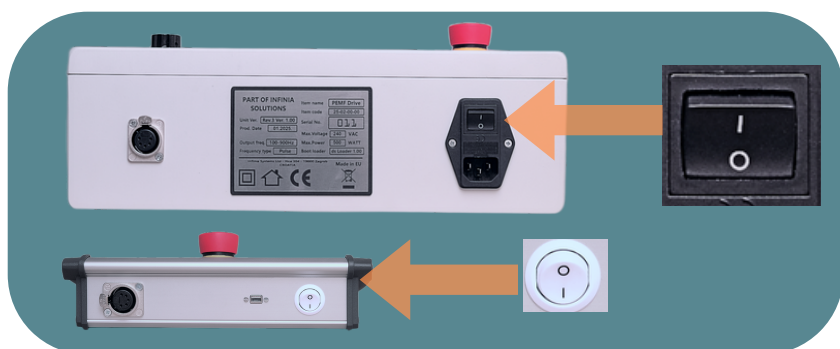

4. UKLJUČIVANJE UREĐAJA

Pritisnite prekidač za paljenje na izvršnoj jedinici i upravljačkoj ploči.

3


UPOTREBA

Sastavljanje i pokretanje
Načini rada i podešavanje
 Održavanje
 Troubleshooting

i N F I N I A
 P U L S E

UPRAVLJAČKA PLOČA

Upravljanje INFINIA PULSE uređajem vrši se na upravljačkoj ploči.
 Funkcije dugmadi opisane su u tablici.

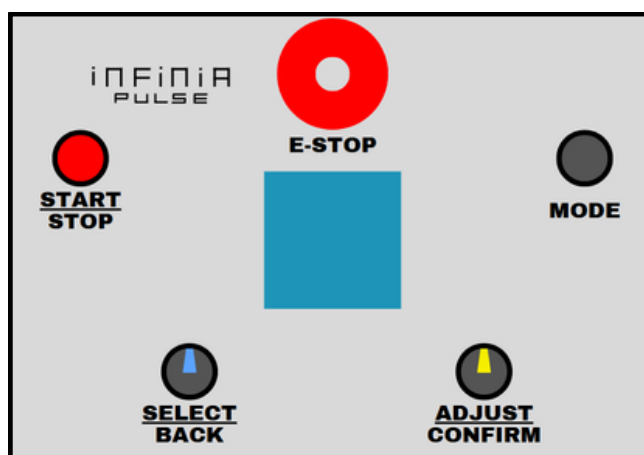

E - STOP	Pritiskom na dugme trenutno se zaustavlja rad uređaja.
START/STOP	Pritiskom na dugme pokreće se zadani program. Pritiskom na dugme za vrijeme rada, uređaj se zaustavlja.
MODE	Pritiskom na dugme mijenja se način rada SINGLE/SPECTRUM
SELECT/BACK	Okretanjem gumba potencijometra odabire se stavka u izborniku. Pritiskom na gumb potencijometra odabirete označenu stavku iz izbornika. Ponovni pritisak vraća u osnovni izbornik.
ADJUST/CONFIRM (PAUSE)	Okretanjem gumba potencijometra mijenja se vrijednost odabrane stavke. Pritiskom na dugme potencijometra potvrđuje se zadana vrijednost. Pritiskom na dugme tijekom tretmana pauzira tretman.

3

UPOTREBA

Sastavljanje i pokretanje
Načini rada i podešavanje
Održavanje
Troubleshooting

INFINIA
PULSE

PODEŠAVANJE UREĐAJA PUTEM KONTROLNE JEDINICE

Jedinstvena značajka INFINIA PULSE uređaja je uvođenje rada u frekvencijskom spektru. Osim klasičnog, SINGLE modaliteta, u kojem uređaj emitira elektromagnetne impulse odabrane pojedinačne frekvencije, pritiskom na dugme „MODE“, način rada se prebacuje na „SPECTRUM“, gdje se frekvencije mijenjaju između zadanih vrijednosti. Parametri se mogu podešavati ovisno o odabranom načinu rada. Na slikama su prikazani izbornici koji se odnose na navedene načine rada, te parametri koji se mogu podešavati.

MODE: SINGLE

TIME: 45 MIN

FREQ.: 432 Hz

PAUSE: 20 %

INTENS.: 45%

SETTINGS

SINGLE - emitiranje pojedinačne frekvencije

TIME - vrijeme trajanja tretmana

FREQ. - odabrana frekvencija za tretman

PAUSE - udio pauze (uređaj ne emitira impuls) u intervalu od 10 sekundi

INTENS. - intenzitet elektromagnetnog zračenja baziran na promjeni radnog ciklusa

MODE: SPECTRUM

TIME: 45 MIN

Fq.: 100-600 Hz

DURAT: 10 S

INTENS: 45%

SETTINGS

SPECTRUM - rad u frekvencijskom spektru

TIME - vrijeme trajanja tretmana

FREQ. - krajnje vrijednosti frekvencijskog spektra

DURAT- duljina trajanja spektra

INTENS. - intenzitet elektromagnetnog zračenja baziran na promjeni duty cycle-a

3


UPOTREBA

Sastavljanje i pokretanje
Načini rada i podešavanje
 Održavanje
 Troubleshooting


iNFINIA
PULSE

PRIMJER PODEŠAVANJA


Za primjer podešavanja uzmimo podešavanje duljine trajanja tretmana u frekvencijskom spektru.

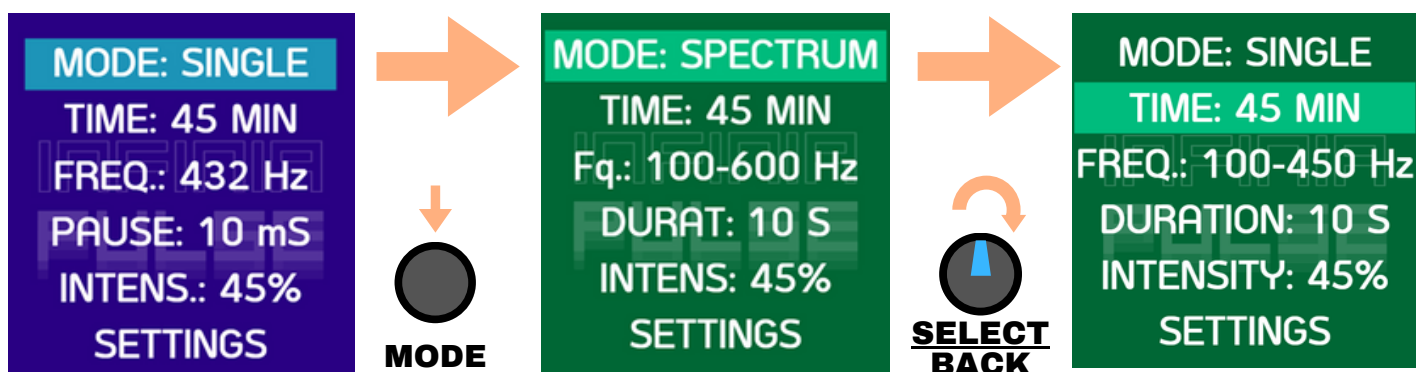

Pritiskom na dugme MODE prebacite način rada u "SPECTRUM", zatim zakretanjem gumba potenciometra SELECT/BACK označite "TIME", te pritiskom na njega potvrdite odabir, što će otvoriti prozor za podešavanje.

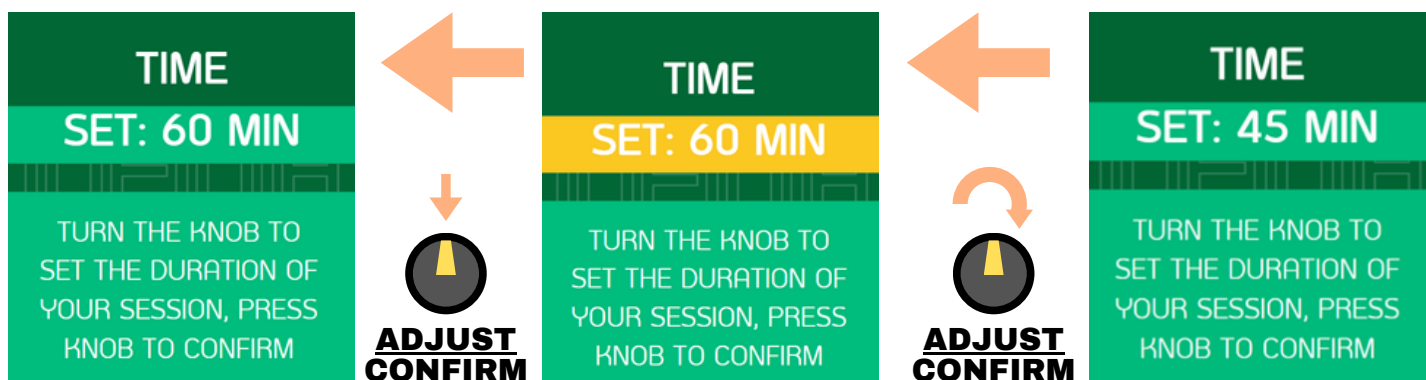

Zakretanjem gumba potenciometra ADJUST/CONFIRM mijenjate vrijednost u prozoru za podešavanje, te pritiskom na navedeni gumb potvrđujete odabir. Pritisak na gumb SELECT/BACK vraća vas u glavni izbornik.

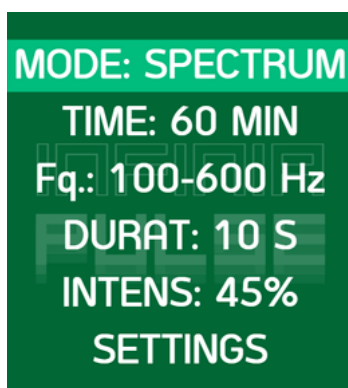

3


UPOTREBA

Sastavljanje i pokretanje
Načini rada i podešavanje
 Održavanje
 Troubleshooting

INFINIA
PULSE

PODEŠAVANJE PARAMETARA NA IZVRŠNOJ JEDINICI

Na izvršnoj jedinici moguće je dodatno podešavanje intenziteta tretmana.

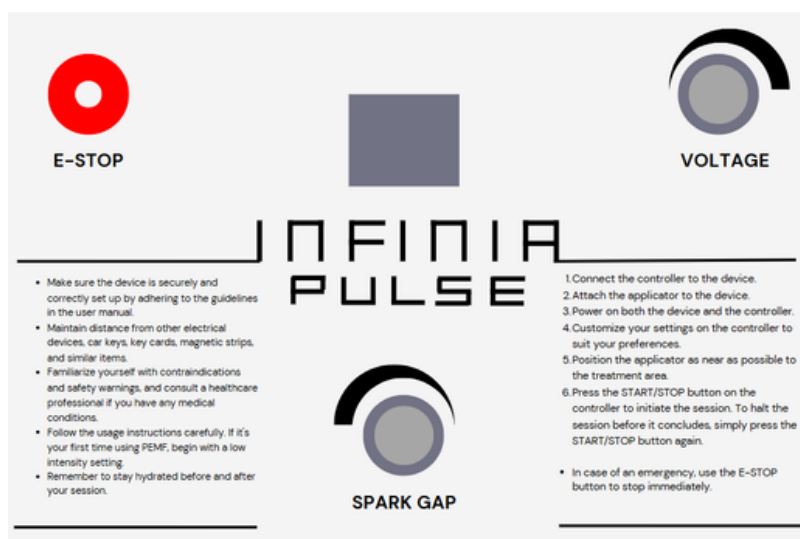

E- STOP

Pritiskom na dugme trenutno se zaustavlja rad uređaja.

VOLTAGE GUMB
POTENCIOMETRA

Regulira intenzitet tretmana putem napona pobude.
 Zakretanjem u smjeru kazaljke na satu povećava se napon pobude.
 Povećanje napona pobude pojačat će intenzitet tretmana.

SPARK GAP GUMB
POTENCIOMETRA

Regulira intenzitet tretmana putem izlaznog napona.
 Zakretanjem u smjeru obrnutom od kazaljke na satu povećava se izlazni napon.
 Povećanje izlaznog napona pojačat će intenzitet tretmana.
VAŽNO! - gumb potenciometra okrenite do točke u kojoj osjećate otpor, zatim stanite. Grubo manipuliranje može dovesti do oštećenja.

3

UPOTREBA

Sastavljanje i pokretanje
Načini rada i podešavanje

Održavanje

Troubleshooting

INFINIA
PULSE

Prije korištenja provjerite je li zaštitna naljepnica neoštećena. U slučaju oštećenja obavezno prijavite proizvođaču.

Za čišćenje i dezinfekciju aplikatora, obrišite ga mekom, čistom krpom navlaženom sa 70% izopropilnog alkohola.

Za čišćenje uređaja koristite samo meku, suhu krpu.

Izbjegavajte raspršivanje tekućih sredstava za čišćenje po uređaju, ne koristite abrazivna sredstva i nikada ne uranjajte INFINIA PULSE uređaj ili njegove dijelove u vodu ili bilo koje drugo tekuće sredstvo.

Izbjegavajte izlaganje INFINIA PULSE uređaja ekstremnim temperaturama, vlazi ili izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za štetu nastalu nepropisnim održavanjem uređaja.

3

UPOTREBA

Sastavljanje i pokretanje
Načini rada i podešavanje
Održavanje
Troubleshooting

i n f i n i a
PULSE

U slučaju poteškoća s radom uređaja, koristite ovu tablicu za brzo prepoznavanje mogućeg uzroka i rješenja problema. Ako problem i dalje traje, obratite se ovlaštenom servisu ili korisničkoj podršci. Ako problem nije naveden u tablici ili se ne može riješiti predloženim koracima, isključite uređaj i kontaktirajte tehničku podršku.

Nemojte samostalno otvarati uređaj ili pokušavati popravke, jer to može poništiti jamstvo. Prije korištenja uređaja, uvijek provjerite sve kabele, priključke i sigurnosne uvjete rada.

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	RJEŠENJE
Ekran prikazuje samo boje koje se izmjenjuju	Uključen čuvar zaslona (screensaver)	Pritisnite bilo koji gumb, ako se nastavlja, isključite i ponovno uključite uređaj.
Uređaj se ne uključuje	Uređaj nije spojen na napajanje	Provjerite je li uređaj pravilno priključen u utičnicu.
Uređaj se ne uključuje, na zaslonu kontrolne jedinice nema prikaza	Pritisnut E-STOP gumb na izvršnoj jedinici Kontrolna jedinica nije ispravno spojena s izvršnom	Provjerite je li pritisnut E-STOP na izvršnoj jedinici - zakretanjem u lijevo vratite ga u početni položaj. Provjerite je li kontrolna jedinica ispravno spojena s izvršnom.
Na zaslonu kontrolne jedinice prikazan je "E-STOP!"	Pritisnut E-STOP gumb na kontrolnoj jedinici	Provjerite je li pritisnut E-STOP na kontrolnoj jedinici - zakretanjem u lijevo vratite ga u početni položaj.
Na zaslonu izvršne jedinice ne pokazuju se brojke	Smetnje u komunikaciji između kontrolne i izvršne jedinice	Provjeriti je li komunikacijski kabel pravilno spojen.

Osnovne informacije

Naziv uređaja: INFINIA PULSE

Vrsta uređaja: wellness uređaj za tretmane pulsnim elektromagnetnim poljem

Namjena: profesionalna upotreba

Električne karakteristike

Ulazni napon: 220V, 50Hz

Max. potrošnja energije: 400W

Sigurnosna klasifikacija: klasa I, IP52 zaštita

Radne karakteristike

Frekvencijski raspon: 50 – 900 Hz

Maksimalna magnetska indukcija: do 200 mT

RMS magnetska indukcija: < 1 μ T

Oblik vala: pravokutni

Način rada: pulsni, trajanje impulsa do 10ms

Trajanje tretmana: Prilagodljivo od 1 do maksimalno 60 min

Fizičke karakteristike

Dimenzije izvršne: 363 x 242 x 120 mm

Dimenzije upravljačke jedinice: 181.2 x 53.2 x 200 mm

Težina: ~9kg

Duljina kabela za napajanje: ~1,5m

Duljina komunikacijskog kabela: ~2m

Aplikatori: kružni, ~ $\varnothing$ 20cm i $\varnothing$ ~28cm

Duljina kabela aplikatora: ~1,5m

Uvjeti rada i skladištenja

Radna temperatura: 10°C – 30°C

Relativna vlažnost zraka: 20% – 60%, bez kondenzacije

Skladištenje: -10°C do 30°C, suho mjesto

Sigurnost i jamstvo

Certifikati: CE

Jamstvo: 3 godine

Uređaj INFINIA PULSE dolazi s 3-godišnjim jamstvom koje pokriva tvorničke nedostatke u materijalu i izradi, pod uvjetom da se uređaj koristi u skladu s uputama proizvođača.

Jamstvo uključuje:

- Popravak ili zamjenu neispravnog uređaja ili njegovih dijelova bez dodatnih troškova za korisnika
- Podršku i savjetovanje u vezi s pravilnim korištenjem i održavanjem uređaja

Jamstvo ne uključuje:

- Oštećenja nastala nepravilnim korištenjem, fizičkim udarcima, vlagom, pregrijavanjem ili neovlaštenim servisiranjem
- Potrošni materijal (ako postoji)
- Oštećenja nastala tijekom transporta ako uređaj nije vraćen u originalnom pakiranju

Uvjeti:

- Jamstvo vrijedi uz predočenje računa i serijskog broja uređaja
- Popravke tijekom jamstvenog roka smije obavljati isključivo ovlašteni servis

INFINIA PULSE Spectrum PEMF Technology je proizvod tvrtke INFINIA SUSTAVI D.O.O. Ovaj uređaj nije medicinski proizvod i koristi se isključivo u wellness svrhe, u skladu s važećim zakonima i propisima.

Za više informacija:

www.infinia-pulse.com

info@infinia-pulse.com

INFINIA SUSTAVI D.O.O. tvrtka je specijalizirana za razvoj i implementaciju tehnoloških inovacija. Kroz primjenu suvremenih tehnologija, pruža rješenja prilagođena potrebama različitih industrija.



Infinia Sustavi d.o.o.

Ilica 304, 10000 Zagreb

Hrvatska

INFINIA PULSE nije medicinski uređaj.

Ovaj proizvod nije namijenjen za dijagnosticiranje, liječenje, terapiju, prevenciju ili ublažavanje zdravstvenih stanja kod ljudi. Uređaj je dizajniran isključivo za neinvazivnu wellness i rekreativnu primjenu, u svrhu podrške subjektivnom osjećaju relaksacije, ravnoteže i osobnog blagostanja.

Korištenje uređaja ne smije se tumačiti kao zamjena za medicinsku procjenu, savjet ili terapiju. Svi korisnici s postojećim zdravstvenim stanjima, uključujući kronične bolesti, neurološke poremećaje, hormonalne disbalanse ili bilo kakvu dijagnosticiranu patologiju, moraju se prije upotrebe konzultirati s kvalificiranim zdravstvenim djelatnikom.

Prije upotrebe nužno je proučiti i pridržavati se uputa u ovom priručniku.

Proizvođač INFINIA SUSTAVI d.o.o. ne preuzima odgovornost za bilo kakve štete, tegobe ili negativne posljedice nastale uslijed nepravilne, neautorizirane ili neodgovarajuće upotrebe uređaja, uključujući ignoriranje upozorenja i kontraindikacija.

Uređaj je namijenjen za uporabu isključivo u skladu s navedenim tehničkim i sigurnosnim uputama.